

Safeflow

IV tilbehør



Ventilen som gjør infusjonssikkerhet ukomplisert

Når infusjonssikkerhet betyr noe

Sikkert, enkelt og kostnadseffektivt nålfritt infusjonssystem


Sikkerhet først

Safeflow nålfritt infusjonssystem tilbyr sikkerhet under forberedelse og administrering av infusjoner. Ventilens utforming sikrer uhindret væskestrøm.

Allsidig og innovativt system

Safeflow nålfritt infusjonssystem omfatter nålfrie produkter som dekker dine behov innen IV-terapi, inkludert infusjonssett og forlengesslanger. Safeflow produktene kobles enkelt til både luer og luer-lock ansatser, og gir nålfri tilgang for rask og enkel medisiner, blodprøvetaking og infusjoner.

Perfekt for din kliniske suksess!

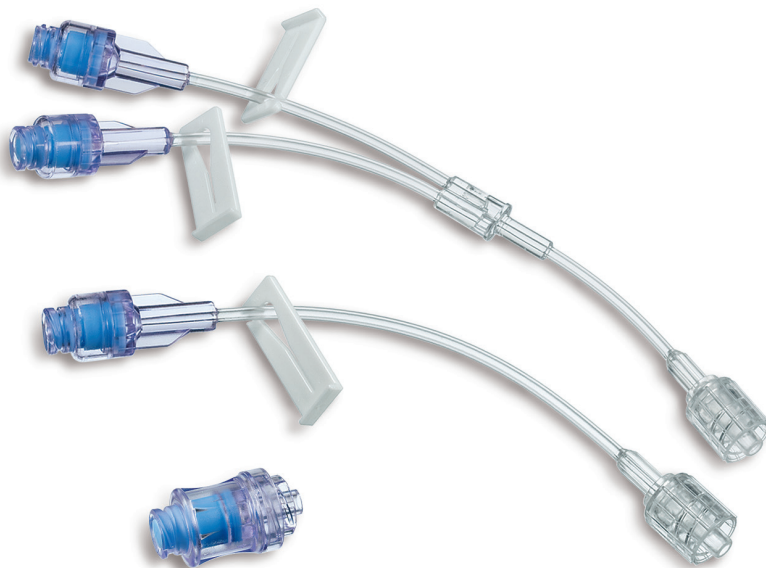

Forlengesslanger

Safeflow er alltid et lukket system. De tynne forlengesslangene muliggjør håndtering vekk fra injeksjonsstedet, som igjen sikrer god pasientbehandling ved infusjon,

aspirasjon og injeksjon. Slangene med liten indre diameter reduserer volumet, og kan brukes til pediatri-/neonatalpasienter.




PVC-fri Neutrapur® slange

Pasientvennlig.
Miljøvennlig avfall.



Safeflow ventil

Tilbyr enkel og sikker nålfri tilgang for injeksjon, aspirasjon eller parallellinfusjoner som et lukket system.

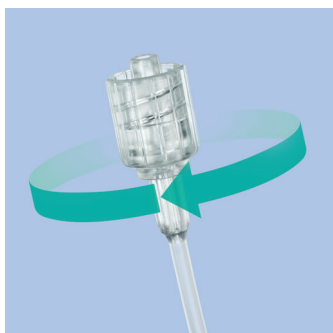

Roterende luer-lock kobling

Sikker og enkel tilkobling uten å vri slangen.




Tilbakeslagsventil

Hindrer tilbakeslag og gir høy sikkerhet ved parallelt trykk og gravitasjonsinfusjoner.

Brukerfordeler



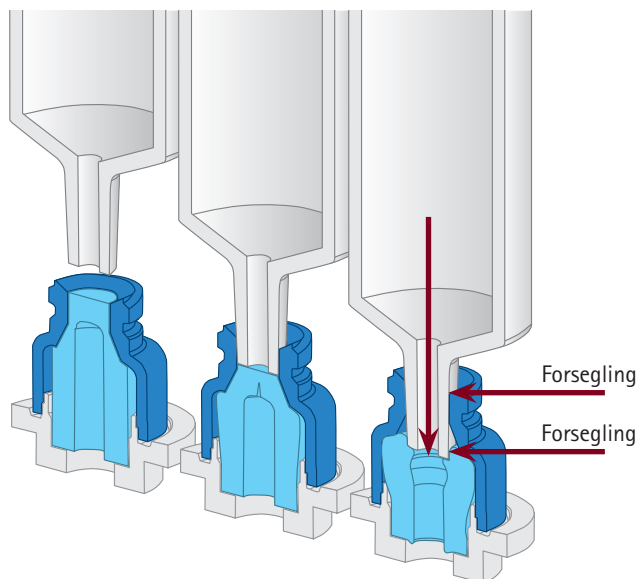



- Desinfiserbar
- Kompatibel med luer-slip og luer-lock
- Gir flere tilganger for aspirasjon eller injeksjon
- Passer alle IV-systemer



Maksimal væskestrøm


Den luer eller luer-lock aktiverte Safeflow ventilen har et innovativt design som sikrer uhindret væskestrøm på opp til 360ml/min.

Ukomplisert infusjonssikkerhet

Produkttype	Beskrivelse		Latex fri	DEHP fri	PVC fri		Pakn. str.	Artikkel nr.
	Safeflow ventil		•	•	•		50	409100H
	Safeflow ventil for arteriell tilgang		•	•	•		50	409110H
	Forlengesslanger	Slange indre ø (mm)	Latex fri	DEHP fri slange	PVC fri slange	Slange-lengde (cm)	Pakn. str.	Artikkel nr.
	Forlengesslange med Safeflow ventil	1,0	•	•	•	10	50	4097154
	Forlengesslange Y-sett med to Safeflow ventiler	1,0	•	•	•	12	50	4097145
	Forlengesslange Y-sett med to Safeflow- og tilbakeslagsventiler	1,0	•	•	•	12	50	4097148
	Infusjonssett							
	Intrafix® SafeSet med Safeflow	3,0	•			210	100	4063004
	Intrafix® Primeline Comfort med Safeflow	3,0	•			180	100	4062158
	Infusomat® Space Line med Safeflow	3,0	•	•	•	230	100	8700110SP
	Infusomat® Space Line, Dosifix®	3,0	•	•	•	270	40	8250245SP



Luer-Lock

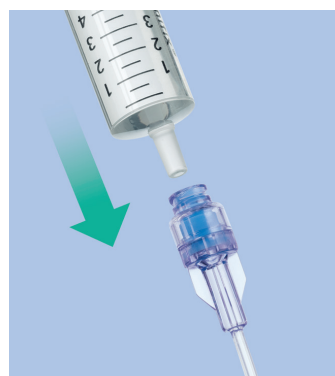

Luer-Slip

Produktdata Safeflow	
Infusjonshastighet:	360 ml/min
Latexfri:	✓
Luer-Slip og Luer-Lock:	✓
Komplett system:	✓
Fyllevolum:	0,09 ml
Antall aktiveringer:	opp til 200
Brukstid:	I henhold til nasjonal eller intern protokoll.
Trykk:	30 Psi