



# Urimed<sup>®</sup> Cath


Langtidskateter 100 % silikon

# Urimed<sup>®</sup> Cath

## Langtidskateter 100 % silikon


### Silikon er blant de katetermaterialene som er anbefalt til langtidskateterisering<sup>1</sup>

- Kateteret i 100 % silikon er meget skånsomt og **hypoallergent** og forårsaker mindre vevsirritasjon og mulige skader. Siden kateteret ikke er overflatebehandlet, har det et relativt **stort lumen** og en **reduisert** tendens til **inkrustasjon og tilstopping**. Silikon medfører **mindre vevsirritasjon** og mulige skader. Sammenlignet med andre katetermaterialer, bidrar silikonkatetre til redusert risiko for inkrustasjon hos pasienter med langtidskateterisering.
- **100% silikon** Foleykatetre muliggjør **mindre traumatisk** kateterisering for pasienten og **lavere** risiko for **tilstopping**<sup>2</sup>.

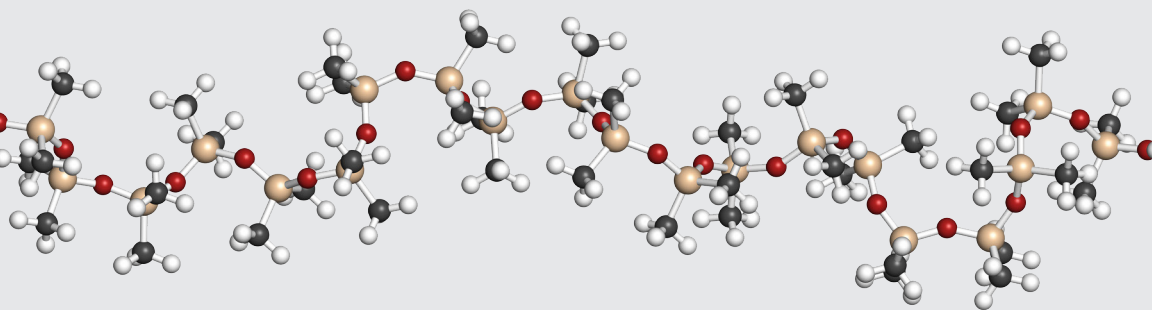

### Silikon versus latex

- Det innvendige lumenet i silikonkateterne sikrer en større drenasjekanal sammenlignet med latex

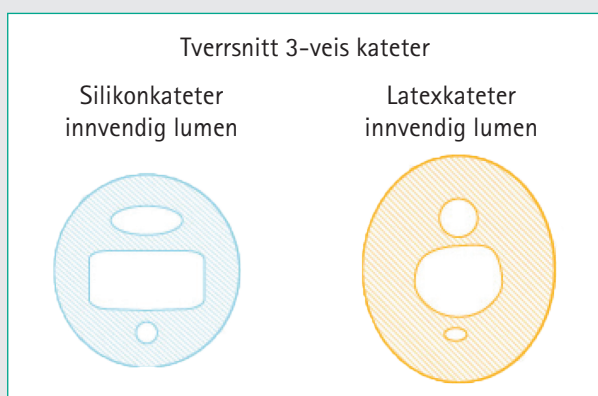

- Produksjonsprosessen til silikonkatetre resulterer i forholdsvis **tynnere vegger og et større lumen** enn latexkatetre, og også silikonbelagte latexkatetre, innenfor samme Charrirestørrelse.

Resultat:

Med en **mindre Charrirestørrelse**, er drenasje og irrigasjon med et 100% silikon Foleykateter **mer effektivt** pga. et større innvendig lumen.

Referanser:

1 - Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (Eds): INCONTINENCE - Fourth International Consultation on Incontinence (ICI), Paris 2009


2 - 1997 British Journal of Urology.N.S. Morris, D.J.

## 100 % klar silikon til både regelmessig blæredrenasje og postoperativ behandling

- **Urimed® Cath** har **røntgentett** katetertupp og kateterskaft.

### Nelaton

Førstevalg  
Egnet for både menn og kvinner

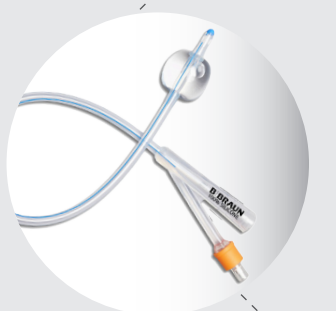

2-veis  
for regelmessig blæredrenasje

### Tiemann

Utformet for å lette  
kateterisering av menn




2-veis  
for regelmessig blæredrenasje

## "Enkel-å-åpne" dobbel pakning. Steril. 2 måter å åpne på: sideveis eller langs med



Trekk tilbake inneremballasjen

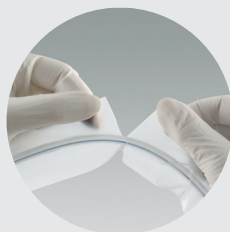

Riv av i perforeringen sideveis



eller i perforeringen langs med kateteret


## Vinnerkombinasjon: Gjør den til din!





**cath&bags** konsept for:

- urinoppsamling
- urinmåling
- blæreinstillering

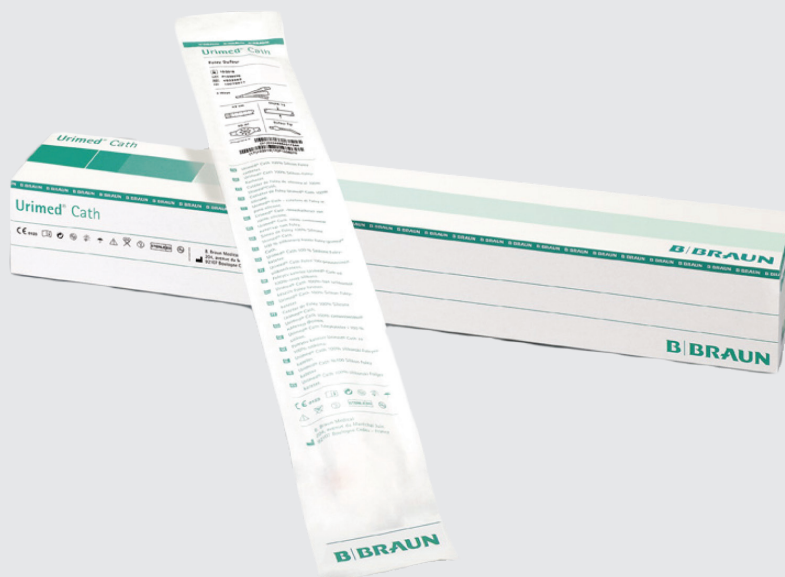

## Urimed® Cath 100 % silikon



Tupp/kopling/ ventil	Produkt	Kateter Ch/Fr	Ballongkapasitet (ml)	Art.nr	Pakn.str. / stk.
	Urimed® Cath Foley Nelaton	12	10	4563250	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	14	10	4563251	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	16	10	4563252	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	18	10	4563253	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	20	10	4563254	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	22	10	4563255	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	24	10	4563256	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	12	10	4563257	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	14	10	4563258	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	16	10	4563259	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	18	10	4563260	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	20	10	4563261	10

B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge  
Tlf. 33 35 18 00 | [www.bbraun.no](http://www.bbraun.no) | E-post: [kundeservice.no@bbraun.com](mailto:kundeservice.no@bbraun.com)