



Ny serie  
Contiplex® katetersett

# PLEXUSKANYLER CONTIPLEX® ULTRA 360

# KONVERTERING TIL NY SERIE

## PLEXUSKANYLER – Contiplex® Ultra 360

B. Braun har utviklet en ny serie Contiplex® kanyler, hvor ultralydreflektorene på kanylene er utformet og plassert slik at synligheten ved bruk av ultralyd er ytterligere forbedret sammenlignet med tidligere Contiplex kanyler. Katetersettets deler er ellers uendrett.

- ultralydreflektorer i X-mønster 360° rundt kanylen
- X-mønster med et høyt antall kanter, som sikrer god synlighet
- sikkerhetsmønster "tupp-kort-kort-lang" er beholdt for sikkert å kunne lokalisere nåltupp
- ergonomisk form på "hub", med pilindikator, som viser retning på nåltuppens sliping
- Tilgjengelig med Tuohy og 20° sliping på Contiplex® S Ultra 360

Contiplex® Tuohy Ultra 360	
Artikkelnr.:	Størrelse:
4898704-01	18 G x 1 1/2" (1,3 x 40 mm)
4898705-01	18 G x 2" (1,3 x 50 mm)
4898710-01	18 G x 4" (1,3 x 100 mm)
4898715-01	18 G x 6" (1,3 x 150 mm)

Contiplex® S Ultra 360	
Artikkelnr.:	Størrelse:
4898650-01	18 G x 2" (1,3 x 50 mm)
4898610-01	18 G x 4" (1,3 x 100 mm)
4898615-01	18 G x 6" (1,3 x 150 mm)

Hvis dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Helse Vest:  
Trudi Helland  
Mobil: 928 34 606  
E-post: [trudi.helland@bbraun.com](mailto:trudi.helland@bbraun.com)

Helse Midt og Nord  
Erlend Lie  
Mobil: 928 34 591  
E-post: [erlend.lie@bbraun.com](mailto:erlend.lie@bbraun.com)

Helse Sør/Øst  
Håkon F. Dahl  
Mobil: 481 61 740  
E-post: [haakon.dahl@bbraun.com](mailto:haakon.dahl@bbraun.com)

Business Unit Manager  
Jan Stian Haugen  
Mobil: 481 61 747  
E-post: [jan.stian.haugen@bbraun.com](mailto:jan.stian.haugen@bbraun.com)

# VIDEREUTVIKLINGEN ER ILLUSTRERT NEDENFOR:



Ultralydreflektorer i X-mønster  
Ultralydreflektorer 360°

20° sliping på Contiplex® Ultra S 360


Contiplex® Touhy Ultra 360

Det unike sikkerhetsmønsteret er beholdt:



Safety pattern:  
Tip – short – short – long

Ergonomisk form på "hub"  
Pilindikator viser retning på nåltuppens sliping

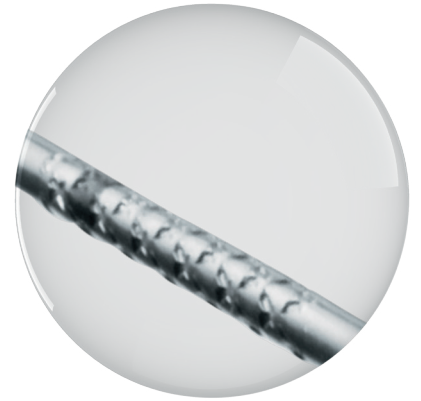

B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge  
Tlf. 33 35 18 00 | [www.bbraun.no](http://www.bbraun.no) | E-post: [kundeservice.no@bbraun.com](mailto:kundeservice.no@bbraun.com)