



Ny serie plexuskanyler

PLEXUSKANYLER ULTRALINE 360

KONVERTERING TIL NY SERIE

PLEXUSKANYLER – ULTRALINE 360

B. Braun har utviklet en ny serie plexuskanyler, hvor ultralydreflektorene er utformet og plassert på en slik måte at synligheten ved bruk av ultralyd er ytterligere forbedret sammenlignet med tidligere plexuskanyler.

- ultralydreflektorer i X-mønster 360° rundt kanylen
- X-mønster med et høyt antall kanter, som sikrer god synlighet
- sikkerhetsmønster "tupp-kort-kort-lang" er beholdt for sikkert å kunne lokalisere nåltupp
- 30° sliping på nåltupp er beholdt
- ergonomisk form på "hub", med pilindikator, som viser retning på nåltuppens sliping
- tilgjengelig i to utgaver: ultralyd eller ultralyd/nervestimulering

Artikkelnr:	
Stimuplex® Ultra	
4892503-01	STIMUPLEX® ULTRA 360 (22 G, 0,70 X 35)
4892505-01	STIMUPLEX® ULTRA 360 (22 G, 0,70 X 50)
4892508-01	STIMUPLEX® ULTRA 360 22 G, 0,70 X 80
4892510-01	STIMUPLEX® ULTRA 360 20 G ,0,90 X 100
4892515-01	STIMUPLEX® ULTRA 360 20 G, 0,90 X 150
Ultraplex®	
4892603-01	Ultraplex® 360 G22 x 1 3/8 (0,70x35mm)
4892605-01	Ultraplex® 360 G22 x 2 (0,70x50mm)
4892608-01	Ultraplex® 360 G22 x 3 1/8 (0,70x80mm)
4892610-01	Ultraplex® 360 G20 x 4 (0,90x100mm)
4892615-01	Ultraplex® 360 G20 x 6 (0,90x150mm)

Hvis dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Helse Vest:
Trudi Helland
Mobil: 928 34 606
E-post: trudi.helland@bbraun.com

Helse Midt og Nord
Erlend Lie
Mobil: 928 34 591
E-post: erlend.lie@bbraun.com


Helse Sør/Øst
Håkon F. Dahl
Mobil: 481 61 740
E-post: haakon.dahl@bbraun.com

Business Unit Manager
Jan Stian Haugen
Mobil: 481 61 747
E-post: jan.stian.haugen@bbraun.com

VIDEREUTVIKLINGEN ER ILLUSTRERT NEDENFOR:



Ultralydreflektorer i X-mønster
X-mønster har et høyt antall kanter som sikrer god synlighet, også ved vinkel på nålen $>45^\circ$

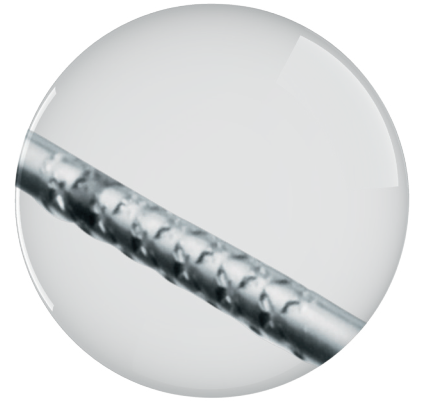

Ultralydreflektorer i X-mønster
Ultralydreflektorer 360°

30° sliping på nåltupp.
Stimuplex® Ultra 360 dekket med ultratynn Parylene som isolasjon ved nervestimulering.
Ultraplex® 360 dekket med et tynt lag silikon.



Det unike sikkerhetsmønsteret er beholdt:



Safety pattern:
Tip – short – short – long

Ergonomisk form på "hub"
Pilindikator viser retning på nåltuppens sliping



B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: officemail.bbm@bbraun.com